

ROTONAX
Excellence

V1 LED



V1 LED

ROTONMAX
Excellence

LAMPE A POLYMERISER A LARGE SPECTRE



HYPER PUISSANCE LUMINEUSE

Grâce à ses LEDs à large spectre et à ultra-haute énergie, la puissance lumineuse est ajustable entre 1 200 et 2 500 mW/cm², garantissant une polymérisation rapide et efficace



LENTILLE A GRAND DIAMETRE

V1 LED est dotée d'une grande lentille de 10mm de diamètre, permettant une couverture d'une plus ample surface



DOUBLE BOUTON POWER ON

V1 LED est équipée de deux boutons de polymérisation avant/arrière, offrant une ergonomie optimisée et une manipulation intuitive pour faciliter les interventions



PLUSIEURS LONGUEURS D'ONDE

Les différentes longueurs d'onde émises permettent de polymériser efficacement tous les matériaux dentaires photopolymérisables



QUATRE MODES DE TRAVAIL

Quatre modes de travail : Turbo, Standard, Ortho, et Check (pour la détection des caries), offrant une polyvalence optimale pour chaque intervention clinique




AFFICHEUR DIGITAL INTUITIF

Afficheur digital intuitif pour un contrôle précis et une utilisation simplifiée en un coup d'œil



CORPS EN ALU MONOBLOQUE

Corps en aluminium monobloc pour une durabilité exceptionnelle, une dissipation thermique optimale et un design ergonomique et léger

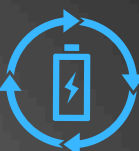

BATTERIE RECHARGEABLE EASY-REMOVE

Batterie rechargeable « Easy-Remove » de 2600 mAh, offrant une grande autonomie et un remplacement rapide sans nécessité d'envoi en SAV, garantissant une utilisation continue et sans interruption



V1 LED

ROTONAX
Excellence

LAMPE A POLYMERISER A LARGE SPECTRE

LES ACCESSOIRES INCLUS



SOCLE CHARGEUR À RECHARGE INDUCTIVE

La V1 LED est livrée avec un socle de charge par induction, intégrant un afficheur digital pour un contrôle précis du niveau de charge et un radiomètre permettant de mesurer l'intensité lumineuse de la lampe



LENTILLE MICROCURE BALL

Facilite la création de contacts proximaux convexes



LENTILLE MICROCURE

Permet une polymérisation ciblée des petits composites et est particulièrement utile pour la fixation provisoire des facettes



LENTILLE ENDO GUIDE

Le Mini Guide Lumière est adapté à la polymérisation de la zone apicale de la dent ainsi qu'à d'autres zones difficiles d'accès

COMPOSITION DU PACK

V1 LED

- 1 x V1 LED Lampe à polymériser sans fil
- 1 x Batterie rechargeable 2600maH
- 1 x Socle chargeur avec radiomètre
- 1 x Alimentateur 5V - 1A
- 1 x Verre orange de sécurité bloquant la lumière bleue
- 3 x Lentilles microcure
- 1 x Lentille endo guide
- 1 x Pack de 100 protections

ROTONMAX
Excellence

V1 LED

LA PUISSANCE ET LA PRÉCISION AU
SERVICE DE LA POLYMÉRISATION

