




ART³ : L'OBTURATION EN MASSE REDÉFINIE

Obtenez des restaurations plus vraies que nature grâce à la nouvelle génération de la technologie de réponse adaptative (ART) cliniquement éprouvée à la base des composites Harmonize™ et SimpliShade Universal Composite. Reposant sur la technologie de réponse adaptative améliorée, SimpliShade Bulk Fill permet une manipulation aisée et un faible taux de rétraction.

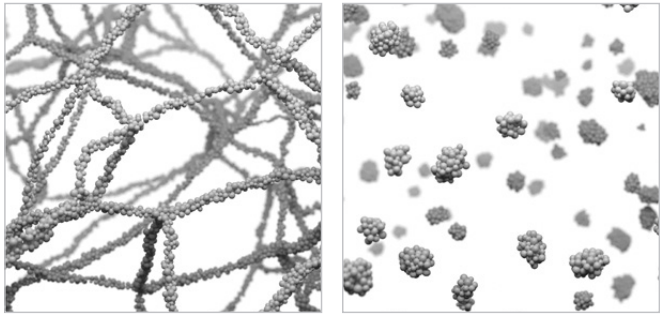


Technologie de réponse rhéologique adaptative pour une facilité de sculptage

ART³ utilise des modificateurs rhéologiques qui réduisent la viscosité du composite au fur et à mesure que vous le manipulez. Une fois la mise en forme achevée, la viscosité est restituée et l'anatomie se stabilise avant la photopolymérisation, ce qui diminue le besoin de reprise de la sculpture.


Technologie d'harmonisation colorimétrique adaptative pour une élégante intégration

Obtenez une intégration exceptionnelle avec des nanocharges spécifiques qui reproduisent les structures amélaire et interagissent avec la lumière de manière naturelle. La restauration et la dent deviennent quasiment indifférenciables.

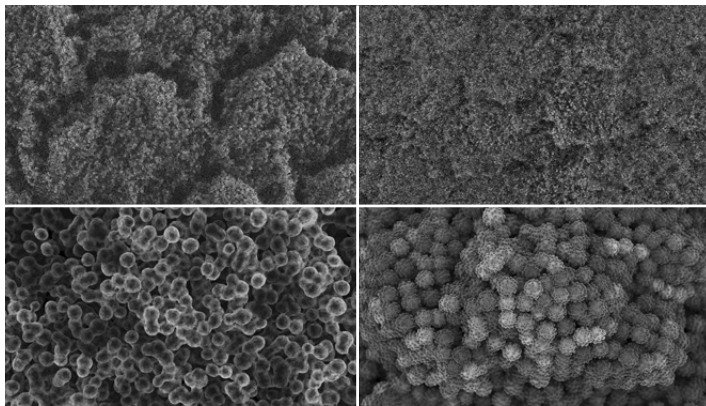

Émail humain

SimpliShade Bulk Fill

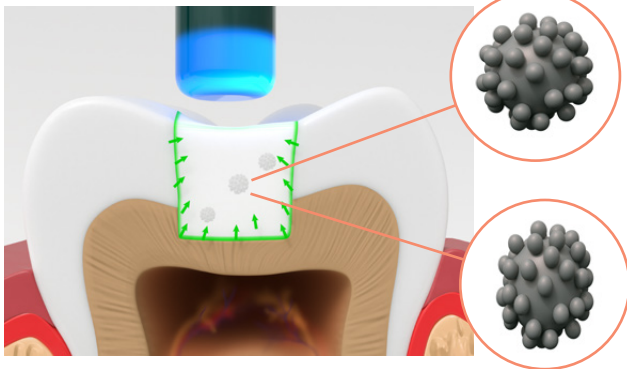

Technologie de réponse adaptative à la contrainte de retrait pour des résultats durables

Au cours de la polymérisation, SimpliShade Bulk Fill intègre une résine à faible taux de rétraction et une composition innovante à base de nanocharges. Ces nanocharges à infusion de résine accélérant l'élasticité pour une réduction du stress et un revêtement spécial soulageant la contrainte interfaciale. Réunissant trois mécanismes de réduction de la contrainte de retrait, il améliore l'adaptation et l'intégrité marginales par la minimisation de la contrainte que la restauration composite exerce sur la couche adhésive pour une adaptation marginale améliorée.



Découvrez-en plus sur ART³ et l'effet sur la contrainte de retrait

Références de commande



SimpliShade Bulk Fill

N° pièce	Description
37211	Seringue SimpliShade Bulk Fill Composite
37212	20 compules SimpliShade Bulk Fill Composite Unidose

RESTEZ EN FAMILLE

avec notre gamme complète de produits SimpliShade !



SimpliShade Bulk Fill Flow

N° pièce	Description
37217	Seringue SimpliShade Bulk Fill Flow
37218	20 compules SimpliShade Bulk Fill Flow Unidose



SimpliShade Universal Composite

Unidoses		Seringue	
N° pièce	Description	N° pièce	Description
37006	Light - 20 compules	37001	Light
37007	Medium - 20 compules	37002	Medium
37008	Dark - 10 compules	37003	Dark
37009	Bleach White - 10 compules	37004	Bleach White
37010	Universal Opaque - 10 compules	37005	Universal Opaque



Pour une finition ultrabrillante, optez pour la gamme Kerr de polissoirs !



Une teinte. Une étape. La meilleure méthode d'obturation en masse.

Pour plus d'informations, scannez le code QR ou visitez le site go.kerrdental.com/simplishadebulkfill

SimpliShade™ BULK FILL



Simplification avec une teinte et en une étape

Les restaurations esthétiques ne pourraient être plus simples, avec SimpliShade™ Bulk Fill. Vous pouvez éviter la couche de revêtement par un positionnement en une étape et réduisez les besoins d'inventaire avec une teinte pour l'ensemble des 16 teintes classiques VITA®. Reposant sur la technologie de réponse adaptative ternaire (ART³), SimpliShade Bulk Fill est facile à manipuler avec une faible contrainte de retrait.

kerrdental.com

©2023 Kerr Corporation. SimpliShade et Harmonize sont des marques déposées de Kerr Corporation. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leur détenteur respectif. Données internes. MKT-22-0879-FR

Kerr™

Kerr™

UNE TEINTE, ET C'EST TOUT

Obtenez l'adaptabilité, la durabilité, la profondeur de polymérisation et la simplicité dont vous avez besoin avec SimpliShade Bulk Fill.

SimpliShade™ Bulk Fill est indiqué pour les restaurations de classe I à V - positionnement direct de restaurations antérieures et postérieures, reconstitutions coronaires et réparation de défauts de restauration.



Système à teinte unique

L'usage d'une teinte qui s'harmonise à la perfection à l'ensemble des 16 teintes classiques VITA®, SimpliShade Bulk Fill vous permet un gain de temps dans la sélection de teintes et la gestion de l'inventaire.



Une étape

Rend superflue toute couche de revêtement, restaurations complètes avec un composite SingleFill™. Affichant un mécanisme de polymérisation amélioré, SimpliShade Bulk Fill permet d'atteindre aisément des profondeurs de polymérisation allant jusqu'à 5 mm en une étape.



Simplicité et durabilité

SimpliShade Bulk Fill offre un taux d'usure inférieur, une résistance à la flexion supérieure et une contrainte de retrait comparable à d'autres marques de matériau d'obturation en masse disponibles sur le marché, pour des restaurations plus solides et durables.





Effet caméléon

L'architecture spéciale des nanocharges reproduit la structure amélaire naturelle et interagit avec la lumière pour une harmonisation quasiment indifférenciable.

Résistance à la flexion

SimpliShade Bulk Fill présente une résistance à la flexion comparable ou supérieure par rapport à Concurrent 1 et Concurrent 2, ce qui permet une meilleure résistance à l'usure et à la fracture au fil du temps.

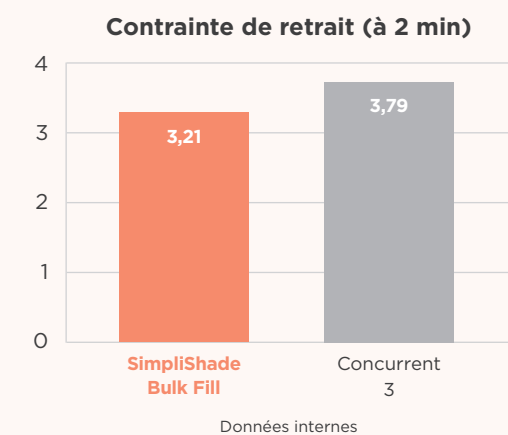
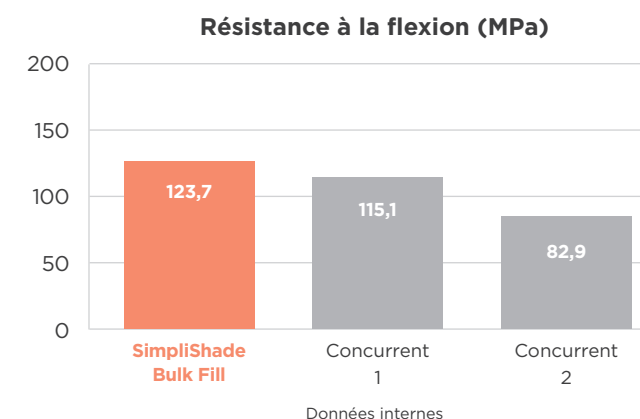


Contrainte de retrait

SimpliShade Bulk Fill présente une contrainte de retrait comparable à celle de Concurrent 3, ce qui se traduit par une dégradation marginale et une sensibilité post-opératoire inférieures permettant une restauration durable.

Taux d'usure

SimpliShade Bulk Fill présente le plus faible taux d'usure par rapport à Concurrent 3, Concurrent 1 et Concurrent 2. Un taux d'usure inférieur se traduit par une restauration qui résistera aux contraintes quotidiennes de la mastication, du brossage et autres.

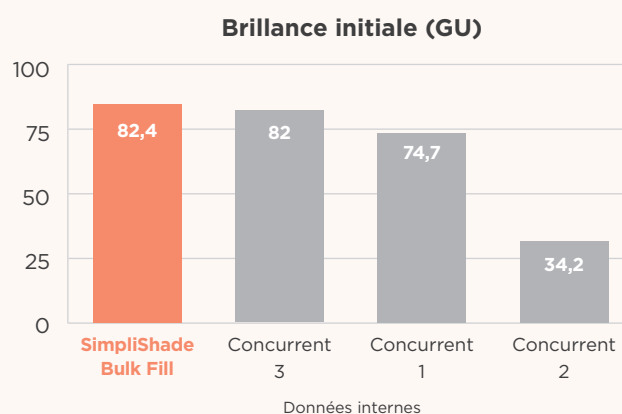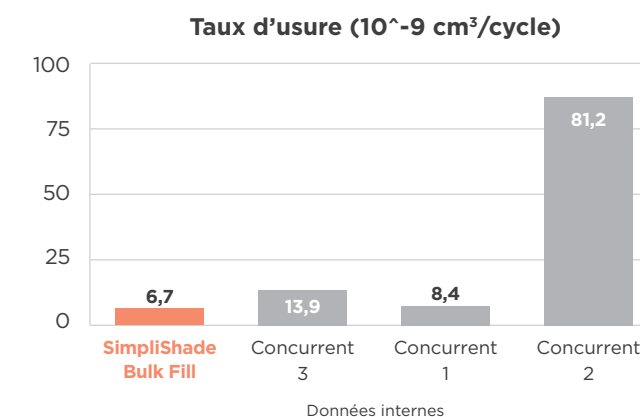


Brillance initiale

SimpliShade Bulk Fill présente un brillant initial comparable à celui de Concurrent 3 et un brillant initial supérieur à celui de Concurrent 1 et Concurrent 2, ce qui permet une restauration plus esthétique.




Propriétés de manipulation

La technologie de réponse rhéologique adaptative réduit la viscosité en cours de manipulation pour un sculptage et une mise en forme facilités.

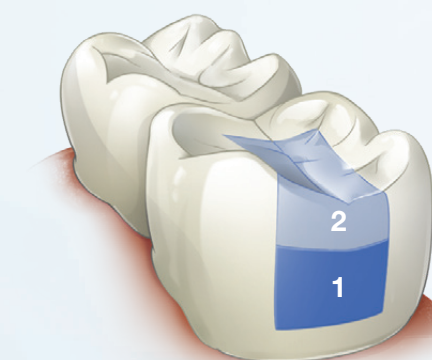

Usage de composite fluide (1) et revêtement par SimpliShade Bulk Fill (2)

Améliorez le scellement et l'adaptation par l'application de composite fluide en vue du revêtement de la cavité (jusqu'à 2 mm). Puis, obturez simplement et sans effort les cavités avec SimpliShade BF jusqu'à 5 mm.

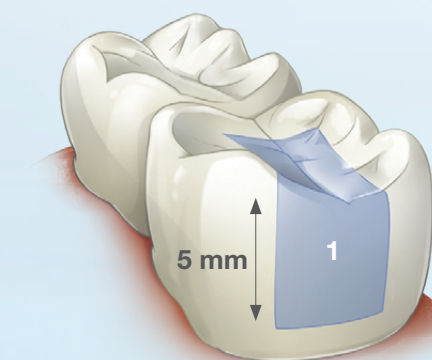

Utilisation uniquement de Bulk Fill pour 5 mm

Obturer des cavités de manière simple et sans effort avec SimpliShade BF jusqu'à 5 mm.